

Analizador automatizado de bioquímica

Global 240



www.bpcbiosed.it



GLOBAL 240 / ISE (GLOBAL 720)



Compacto y rápido

Su nuevo analizador de bioquímica

Analizador automatizado de bioquímica GLOBAL 240 / ISE (GLOBAL 720)

- Hasta 240 tests/hora
- Modulo optional ISE: Na, K, Cl, Li (+480 tests/hour)
- Random Access
- 60 posiciones reactivos independientes
- Hasta 50 posiciones para muestras, controles y estándares
- Estación Automática de lavado
- Inmunoturbidimetría
- Función estadísticas
- Tubos primarios

La mayor flexibilidad

- Cargamento en continuo (muestras, reactivos...)
- Primeros resultados después de 2 minutos solamente
- Ejecución inmediata de tests STAT
- La apertura del compartimento muestras/reactivos provoca siempre el paro del muestreo
- Bajo consumo de agua
- Sin procedimiento para parar o empezar
- Siempre listo para trabajar

GLOBAL 240 / ISE (GLOBAL 720)



Reactivos

- Bandeja reactivos: 30 a 60 posiciones independientes
- Grandes, medianos y pequeños viales
- Adaptador para tubos para reactivos volumen muerto mínimo
- Enfriamiento permanente de la bandeja de reactivos
- Sensor de nivel reactivos

Muestras




- Bandeja muestras: 50 posiciones (40 tubos primarios o tubos + 10 para estándares y controles)
- Muestreo de alta precisión con jeringa Hamilton
- Hasta 200 pacientes para una rutina
- Sin límite de almacenamiento de resultados
- Sensor de nivel de muestra
- Sonda permanente de lavado
- Lector de código de barras interno (opcional)

Software

- Optimizado para touch screen (no incluido)
- Sistema abierto
- Función Stat
- Añadido de pacientes en continuo
- Analisis: Punto Final, Cinética, Tiempo Fijo, Diferencial, Blanco muestra, Multi-estándar, Bicromatismo, Inmunoturbidimetría
- Levey-Jennings + Westgard rules checks and graphs
- 4 niveles de management de incompatibilidades de reactivos
- Métodos calculados
- Estadísticas diarias de tests
- Protocolos comunicación LIS bidireccional (xml, csv, realtime, ...)
- Control a distancia

Grupo óptico

- Bombilla halógena de larga duración
- 9 filtros interferenciales: 340-380-405-450-505-546-570-620-700 nm
- Lectura simultánea sobre 9 longitudes de onda a través de fibra óptica
- Trayecto óptico: 6 mm
- 50 cubetas de lectura de larga duración
- Estación de lavado automático para cubetas
- Bajo consumo de agua: < 2 L/hora en uso máximo
- 250 lecturas cada 15 segundos!
- Tecnología de fibra óptica

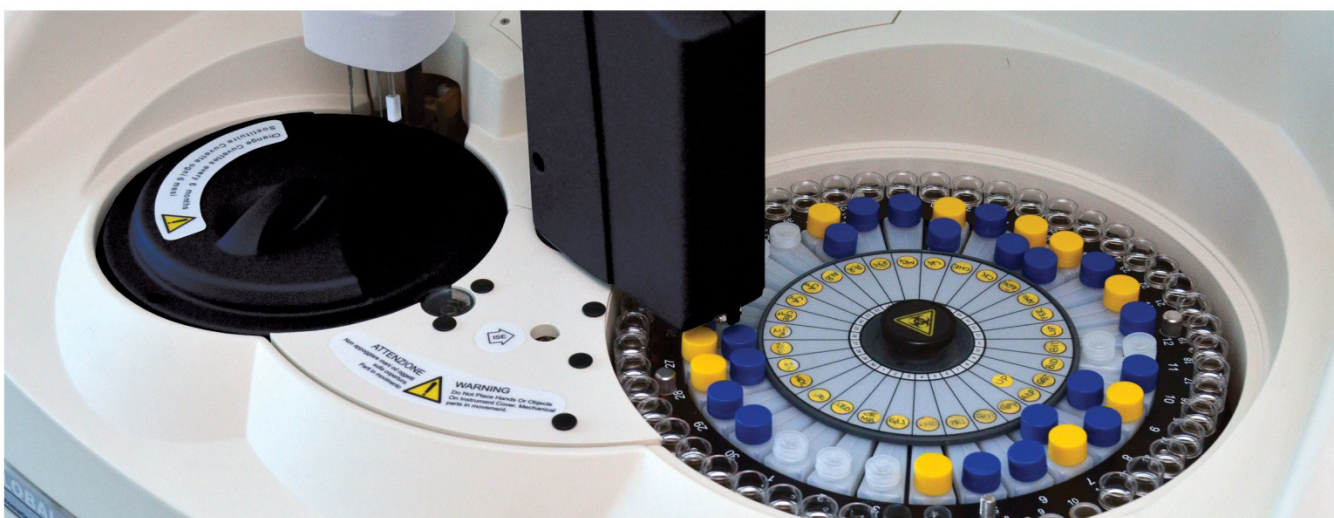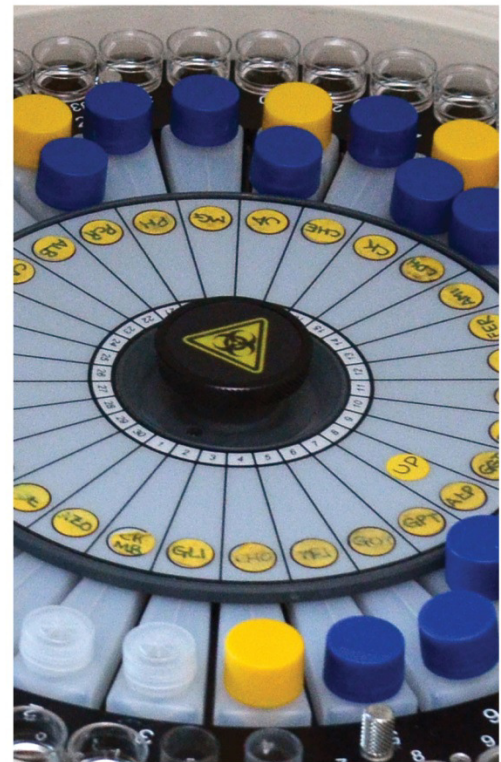
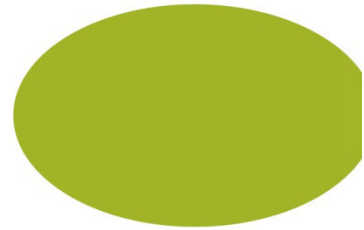


● Características técnicas

- Dimensiones neto: 78 cm x 64 cm x 54 cm, Peso neto: 50 Kg
- Dimensiones bruto: 94 cm x 79 cm x 80 cm, Peso bruto: 80 Kg

● Servicio Técnico

- Especialistas en química clínica contestan a sus preguntas .
Por favor contáctenos para más detalles.
- Video tutorial disponible para un fácil aprendizaje.

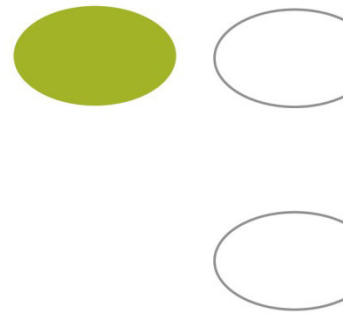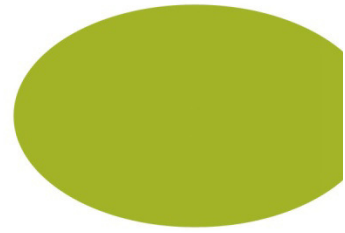

GLOBAL 240 / ISE (GLOBAL 720)



BPC BioSed Srl
Traversa del Grillo km. 0,600
00060 Castelnuovo di Porto
ROME / ITALY

Phone: +39 069073666
Fax: +39 069073200

www.bpcbiosed.it
info@bpcbiosed.it

Distribuidor:

versión: 16 / 11 / 2017

www.bpcbiosed.it